


FTA–ABS IFT Test System

Bestätigungstest für die Syphilis nach dem Prinzip des indirekten Immunfluoreszenztests

Das IFT Testsystem der Fa. ZEUS Scientific Inc. ist eine klassische und bewährte Methode, die, alternativ zum Immunoblot, nach einem positiven Screeningtest zur Bestätigung eingesetzt werden kann.

Das Fluoreszenz-Treponemen-Antikörper-Absorptions-Testsystem ist eine Modifikation des FTA-ABS Standardtests und verwendet als Absorbens eine standardisierte Mischung einer Reiter-Treponemenkultur. Auf den Objektträgern des FTA-ABS-Testsystems von Zeus befinden sich lebensunfähige Zellen von *Treponema pallidum* (Nichols-Stamm) als Substrat (Antigen).

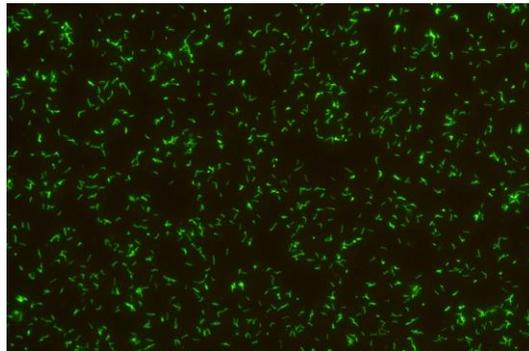

Quelle: ZEUS
4+ positives Patientenserum (FITC gefärbt), getestet für Sekisui Virotech GmbH

- ▼ hohe Spezifität durch Absorptionsreagenz
- ▼ verschiedene Kontrollen im Kit enthalten
 - reaktive Kontrolle
 - nichtspezifische Kontrolle

Bestellnummer:

HW/7001

FTA-ABS IFT Kit

10x10 Bestimmungen



F_FTA-abs_20150818_01

