


Parasep®


Anreicherungssysteme für Stuhlparasiten

Auf einen Blick:

- Vertikale Filtration, geschlossenes System
- Standardisierte Prozedur: Keine Waschschrirte
- Röhrcchen vorgefüllt mit Fixiermittel
- Patentierte Technologie
- **Parasep® SF:**
Lösungsmittel-frei, kleinere Filterporen
- **Apafix™:**
Formalin-freies Fixiermittel:
keine Gesundheitsschädigung

Abarbeitung

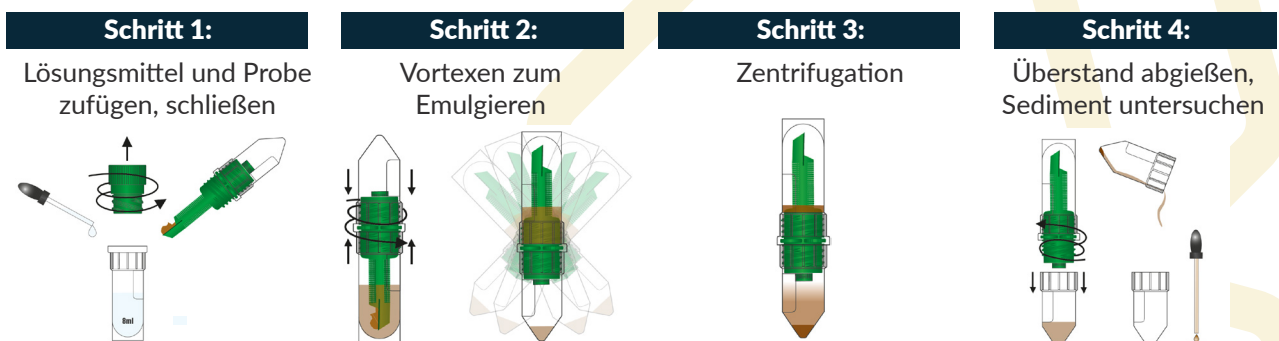

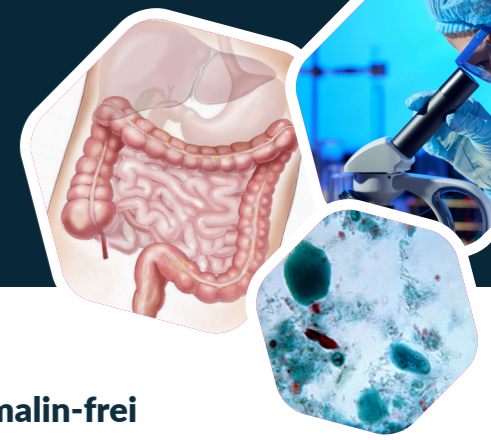

Parasep® SF

- Lösungsmittel-frei (solvent free)
- Kein Ethylacetat nötig - gleicher Effekt durch kleinere Filterporen
- Verbesserte Sicherheit und nicht gesundheitsschädlich
- Erhöhte Sensitivität und Effizienz





Apafix™

Universalfixiermittel für Helminthen Eier und Larven, Protozoenzysten und Oozysten

- Vereinfacht die Probenbearbeitung durch Ein-Schritt-Prozess
- Formalin-freies Fixiermittel: Ungiftig, nicht brennbar und umweltfreundlich
- Zwei Jahre Haltbarkeit
- Einsetzbar in:
 - Mikroskopie (morphologische Tests)
 - PCR
 - ELISA
 - Färbungen (Lugolsche Lösung, Trichrom, Ziehl-Neelsen und weitere)

Weltweit einmaliges, patentiertes Filtersystem

- Dreistufiges Matrixfiltersystem
- In der Schmutzfalle werden größere Stuhlstücke zurückgehalten ohne den Filter zu blockieren
- Auch die größten Parasiteneier können den Filter passieren
- Der Sicherheitsverschluss verhindert das Austreten biologischen Materials

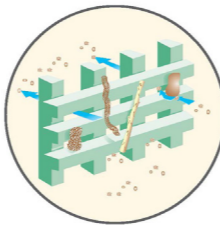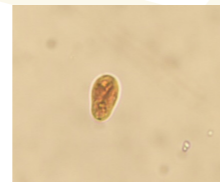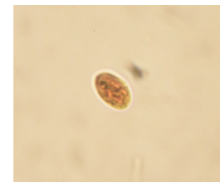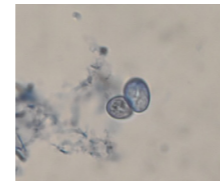

Parasep® SF mit Apafix™ - Lösungsmittel- und Formalin-frei

Produkt /Format	Artikelnummer	Beschreibung
Mini Parasep® SF 3.3ml Apafix™		
40 Reaktionen	HW/AP108801	Stuhlparasiten Anreicherungssystem (15 ml Zentrifugenaufsatz) mit 3,3 ml Apafix™ Fixiermittel.
Midi Parasep® SF 8ml Apafix™		
40 Reaktionen	HW/AP149901	Stuhlparasiten Anreicherungssystem (50 ml Zentrifugenaufsatz) mit 8 ml Apafix™ Fixiermittel.
Midi Parasep® 6ml Apafix™		
40 Reaktionen	HW/AP145002	Stuhlparasiten Anreicherungssystem (50 ml Zentrifugenaufsatz) mit 6 ml Apafix™ Fixiermittel.
Mini Parasep® 2.4ml Apafix™ + 40ml Ethyl Acetate		
40 Reaktionen	HW/AP146004	Stuhlparasiten Anreicherungssystem (15 ml Zentrifugenaufsatz) mit 2,4 ml Apafix™ Fixiermittel und Ethylacetat.
Midi Parasep® 6ml Apafix™ + 80ml Ethyl Acetate		
40 Reaktionen	HW/AP145003	Stuhlparasiten Anreicherungssystem (50 ml Zentrifugenaufsatz) mit 6 ml Apafix™ Fixiermittel und Ethylacetat.



Parasep® SF: Lösungsmittel-frei und kleinere Filterporen

Produkt /Format	Artikelnummer	Beschreibung
Mini Parasep® SF 3.3ml SAF & Triton X		
40 Reaktionen	HW/AP108920	Stuhlparasiten Anreicherungssystem (15 ml Zentrifugenaufsatz) mit 3,3 ml SAF (Natriumacetat-Formalin) und Triton X.
Midi Parasep® SF (8ml SAF & Triton X)		
40 Reaktionen	HW/AP149920	Stuhlparasiten Anreicherungssystem (50 ml Zentrifugenaufsatz) mit 8 ml SAF (Natriumacetat-Formalin) und Triton X.
Mini Parasep® SF 3.3ml Formalin & Triton X		
40 Reaktionen	HW/AP108900	Stuhlparasiten Anreicherungssystem (15 ml Zentrifugenaufsatz) mit 3,3 ml Formalin (10 %) und Triton X.

Parasep®

Anreicherungs-systeme für Stuhlparasiten



Parasep®

Produkt /Format	Artikelnummer	Beschreibung
Mini Parasep® 2.4ml SAF & Triton X		
40 Reaktionen	HW/AP146500	Stuhlparasiten Anreicherungs-system (15 ml Zentrifugenaufsatz) mit 2,4 ml SAF (Natriumacetat-Formalin) und Triton X.
Midi Parasep® 6ml SAF & Triton X		
40 Reaktionen	HW/AP145500	Stuhlparasiten Anreicherungs-system (50 ml Zentrifugenaufsatz) mit 6 ml SAF (Natriumacetat-Formalin) und Triton X.
Mini Parasep® 2.4ml SAF & Triton X + 40ml Ethyl Acetate		
40 Reaktionen	HW/AP146501	Stuhlparasiten Anreicherungs-system (15 ml Zentrifugenaufsatz) mit 2,4 ml SAF (Natriumacetat-Formalin), Triton X und Ethylacetat.
Midi Parasep® 6ml SAF & Triton X + 80ml Ethyl Acetate		
40 Reaktionen	HW/AP145501	Stuhlparasiten Anreicherungs-system (50 ml Zentrifugenaufsatz) mit 6 ml SAF (Natriumacetat-Formalin), Triton X und Ethylacetat.
Mini Parasep® 2.4ml Formalin & Triton X + 40ml Ethyl Acetate		
40 Reaktionen	HW/AP146400	Stuhlparasiten Anreicherungs-system (15 ml Zentrifugenaufsatz) mit 2,4 ml Formalin (10 %), Triton X und Ethylacetat.
Midi Parasep® 6ml Formalin & Triton X + 80ml Ethyl Acetate		
40 Reaktionen	HW/AP145400	Stuhlparasiten Anreicherungs-system (15 ml Zentrifugenaufsatz) mit 6 ml Formalin (10 %), Triton X und Ethylacetat.
Mini Parasep®		
40 Reaktionen	HW/AP146000	Stuhlparasiten Anreicherungs-system (15 ml Zentrifugenaufsatz).
Midi Parasep®		
40 Reaktionen	HW/AP145000	Stuhlparasiten Anreicherungs-system (50 ml Zentrifugenaufsatz).



Zusatzreagenzien

Produkt /Format	Artikelnummer	Beschreibung
Ethyl Acetate 250ml		
250 ml	HW/AP1473	Ethylacetat zur optionalen Zugabe.
Lugol's Iodine 250ml		
250 ml	HW/AP1486	Lugolsche Lösung zur Färbung (Iod-Kaliumiodid-Lösung).

Hersteller: **Apacor Ltd**,
Berkshire, England



VIROTECH Diagnostics GmbH

📍 Löwenplatz 5 65428 Rüsselsheim am Main 📞 +49 (0)6142 69090

📠 +49 (0)6142 690919

✉ info@virotechdiagnostics.com

🌐 www.virotechdiagnostics.com

